



هایساید ایمپرنشن



محلول ضد عفونی کننده غلیظ مخصوص قالبگیری و تری های قالبگیری

هایساید ایمپرنشن یک محلول غلیظ برای ضد عفونی قالبگیری دندان پزشکی، تری های قالبگیری و ابزار آزمایشگاهی دندان پزشکی است. این محصول به واسطه فرمولاسیون آنتی میکروبیال، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد. هایساید ایمپرنشن فرمولاسیون غلیظ و مقرون به صرفه دارد و به دلیل وجود ترکیبات بازدارنده خوردگی با اکثر مواد سازگار می باشد. ماهیت فاقد آکدهید این محصول از رنگبری و یا تثبیت خون و پروتئین جلوگیری می کند.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- محلول غلیظ و مقرون به صرفه
- فاقد آکدهید، فنول و کلر
- فاقد اثرات مخرب بر شکل یا پایداری قالب دندان

مشخصات محصول


رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۹-۱۲/۵
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
انحلال پذیری (در آب)	کاملاً محلول



Special for
Infection Control
in Dental Settings

بسته بندی

حجم ۱۰ لیتری	۲ عدد در هر کارتن
حجم ۵ لیتری	۳ عدد در هر کارتن
حجم ۱ لیتری	۶ عدد در هر کارتن
حجم ۵۰۰ میلی لیتری	۲۰ عدد در هر کارتن
حجم ۲۵۰ میلی لیتری	۳۰ عدد در هر کارتن

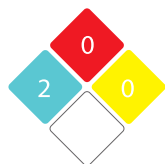

Hazard Rating

Concentrate	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هایساید ایمپرشن)
 • ۳۰ گرم بنزاکانیوم کلراید

مواد جانبی

- سورفکتانت
- بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 10 minutes use dilution: 1%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر


According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 15 minutes use dilution: 1%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14652 (contact time: 60 minutes use dilution: 1%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 15 minutes use dilution: 2%)	Adenovirus type 5 Herpes simplex virus (HSV-1)
---	---

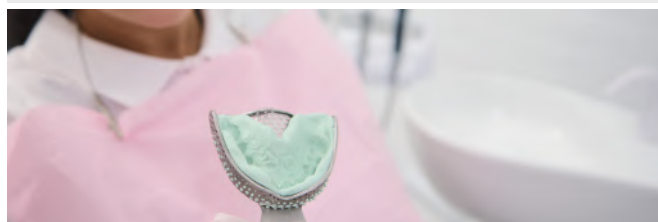

روش مصرف

محلول غلیظ را باید پیش از مصرف با آب تا ۱٪ رقیق نمایید. مواد قالبگیری را کاملاً در آن به مدت حداقل ۱۰ دقیقه غوطه ور نموده و سپس با آب سرد آبکشی کنید. قبل از استفاده برای اولین بار، سازگاری مواد را با محصول تست کنید.

سازگاری

هایساید ایمپرشن با انواع ایمپرشن های ساخته شده از آلژینات، پلی اتر و سیلیکون سازگار است. قبل از استفاده برای اولین بار، سازگاری مواد را با محصول تست کنید.